


# Encosto Anatômico Vicair®

## Introdução

O Encosto Vicair® Anatomic é uma almofada para as costas da cadeira de rodas que é usada em combinação com a Capa com Cinto Vicair®. Pode ser usado em cadeiras de rodas simples a complexas. O Encosto Anatomic é fácil de instalar e oferece conforto, estabilidade e prevenção de úlceras de pressão. Acompanha e suporta os contornos do corpo e é fácil de ajustar em casos de cifose/escoliose graves.

## Principais Componentes

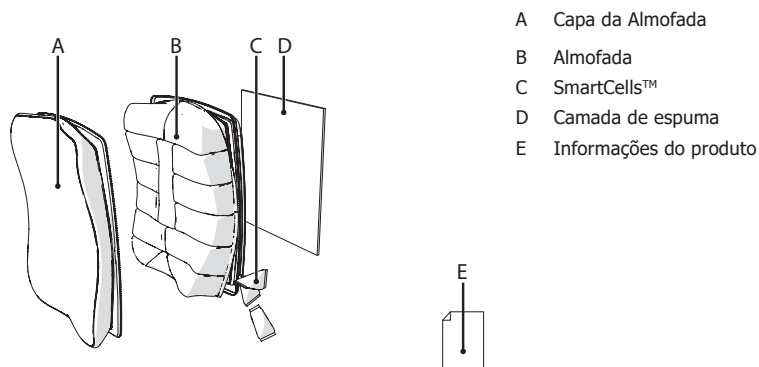

## Especificações Gerais do Produto

Nome do produto: Encosto Anatômico Vicair  
Fabricado por: Vicair BV, Países Baixos ]  
Garantia: 24 meses  
Materiais utilizados: Todos isentos de látex  
Almofada: Tecido de poliéster, revestido com poliuretano. Parte traseira em tecido Nylon.  
Enchimento: SmartCells preenchidos com ar com revestimento de baixa fricção  
Camada de espuma: Espuma de polietileno flexível  
Capa: Malha de ar 3D de poliéster. A capa pode ser lavada na máquina. Em conformidade com EN1021-1:2006, EN1021-2:2006 e CAL117.



Mínimo 15 kg  
Máximo 150 kg



Mínima -20°C  
Máxima 55°C



50 m (164ft)  
abaixo do nível do  
mar  
2400 m (8000ft)  
acima do nível do  
mar



Mínimo 0%  
Máximo 100%

Dimensões de tamanhos padrão Largura x Altura	Encosto Anatômico com capa		Peso
	Número do Prod.	Código:	Aproximado
CM			
35 x 32	15203532	AABC/AX/3532	0,5 Kg
40 x 32	15204032	AABC/AX/4032	0,6 Kg
40 x 40	15204040	AABC/AX/4040	0,6 Kg
40 x 48	15204048	AABC/AX/4048	0,6 Kg
45 x 40	15204540	AABC/AX/4540	0,7 Kg
45 x 48	15204548	AABC/AX/4548	0,7 Kg
45 x 56	15204556	AABC/AX/4556	0,7 Kg
50 x 48	15205048	AABC/AX/5048	0,8 Kg
50 x 56	15205056	AABC/AX/5056	0,8 Kg

Informações sobre tamanhos especiais sob consulta.

**VICAIR®**  
the best in body support

Vicair BV  
Bruynvisweg 5  
1531 AX Wormer  
Nederland  
T +31(0)75 642 9999  
F +31(0)75 642 9990  
info@vicair.com  
www.vicair.com



## Precauções e Instruções de Segurança







- en Attention!** Be sure to read and understand this product data sheet completely. Also read the Academy user manual shipped with this product, for additional user-, maintenance and care instructions. Be sure to understand the instructions "checking for bottoming out" and "checking for redness of skin".
- pt Atenção!** Certifique-se de ler e compreender completamente esta folha de Instruções do produto.
- de Achtung!** Bitte lesen Sie das Produktdatenblatt komplett. Lesen Sie auch das Academy Benutzer Manual mit zusätzlichen Wartungs- und Pflegehinweisen, welches diesem Produkt beigelegt ist. Wir weisen Sie darauf hin zu verstehen, was mit den Anweisungen zu den Themen „Durchsitzen“ und „Prüfen auf gerötete Haut“ gemeint ist.
- se OBS!** Var noga med att läsa igenom och förstå detta produktdatablad helt. Läs även Academy bruksanvisning som levereras med denna produkt, för ytterligare användarvänlighet, underhåll- och skötselråd. Se till att du förstår instruktionerna „kontroll att brukaren inte bottnar igenom“ och „kontroll för hudrodnad“.
- da OBS!** Læs dette produktdatablad grundigt igennem. For yderligere anvendelses- og vedligeholdelsesinstruktion læs da også Academy brugermanualen, der leveres sammen med dette produkt. Vær særligt opmærksom på, at du forstår instruktionerne i afsnittene "Tjek at brugeren ikke "går igennem" puden" og "Sørg for, der ikke opstår rødmen i huden.
- no \*obs!** Les dette produktblad grundig igjennom. For ytterligere bruks- og vedlikeholdsanvisning les da også Academy bruksanvisning, som leveres med dette produkt. Vær særlig oppmerksom på, at du forstår instruksjonene i avsnittene "Kontroller at brukeren ikke sitter gjennom puten" og "forsikre deg om at det ikke oppstår rødhet i huden".
- fi Huomio:** Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tuoteselosteen. Lue myös tuotteen mukana toimitettu käyttöohje huolto- ja käyttöohjeineen. Varmista, että olet ymmärtänyt paineen tasauksen ja ihon punoituksen tarkistuksen tärkeyden.
- fr Attention!** Assurez-vous d'avoir lu et compris cette fiche dans sa totalité. Lisez également le mode d'emploi Academy livré avec le produit pour les instructions de maintenance, et de précaution d'utilisation complémentaires. Assurez-vous de comprendre les rubriques "Vérifier le talonnement" et "Contrôler les rougeurs de la peau".
- es ¡Atención!** Asegúrese de leer y entender esta ficha de producto completamente. Lea también el manual del usuario "Academy" que se incluye con este producto, para el mantenimiento y cuidados adicionales. Asegúrese de entender las instrucciones de "verificar el enrojecimiento de la piel" y "verificar la profundidad – que no hay espacio libre entre la espalda y el cojín".
- pl UWAGA!** Pamiętaj, aby w pełni przeczytać i zrozumieć kartę produktu. Należy również przeczytać także instrukcję użytkowania poduszek ACADEMY dostarczonej wraz z produktem, dla po to aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi, konserwacji i pielęgnacji. Pamiętaj, aby zapoznać się ze wskazówkami w instrukcji "Kontrola dna poduszki" i "Kontrola zaczerwienienia skóry".

## Instalação

**Atenção!** A Vicair recomenda instalar e ajustar o Encosto Anatômico sob supervisão direta de um terapeuta ou profissional de tecnologia assistiva.

**Atenção!** Sempre use almofada com capa.

- Verifique o tamanho da almofada - **1**
- Se você deseja instalar a Capa com Cinto, consulte a ficha técnica do produto - **2**
- Coloque a almofada - **3**
- Peça a seu terapeuta/consultor técnico para ajustar as alças da Capa com Cinto - **4**
- Dobre a aba da almofada sobre a parte de trás da alça - **5**
- Use o velcro para prender a extremidade da aba ao assento da cadeira de rodas - **6**

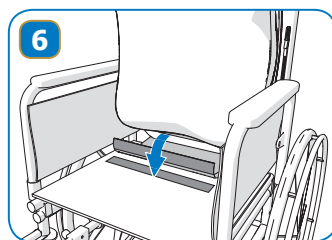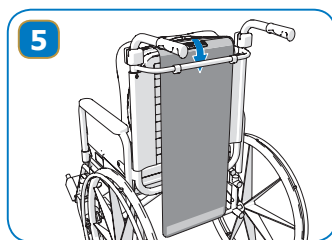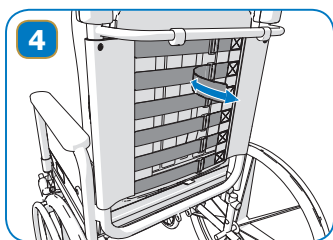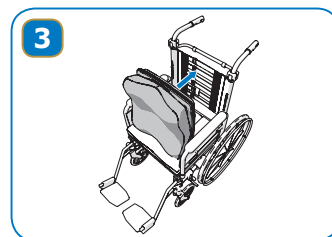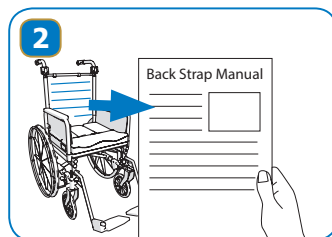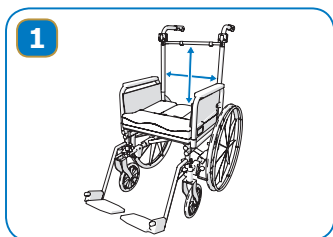

Importado e distribuído por: MAIS MOVIMENTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA REABILITAÇÃO LTDA. CNPJ 58.895.681/0001-83. Rua Ernesto Bristotti Nº 41 - Jardim Myriam - Campinas/SP. CEP: 13.098-408. AFE ANVISA nº 8.11.374-2. Resp. Técnico: Emmanuel Dias de Sousa Lopes CREFITO/SP 188523-F. Registro ANVISA nº 81137420023. Serviço de atendimento ao consumidor SAC: (19) 3304-2500 / sac@maismovimento.com.br.

**VICAIR**<sup>®</sup>  
the best in body support

Vicair BV  
Bruynvisweg 5  
1531 AX Wormer  
Nederland  
T +31(0)75 642 9999  
F +31(0)75 642 9990  
info@vicair.com  
www.vicair.com

